


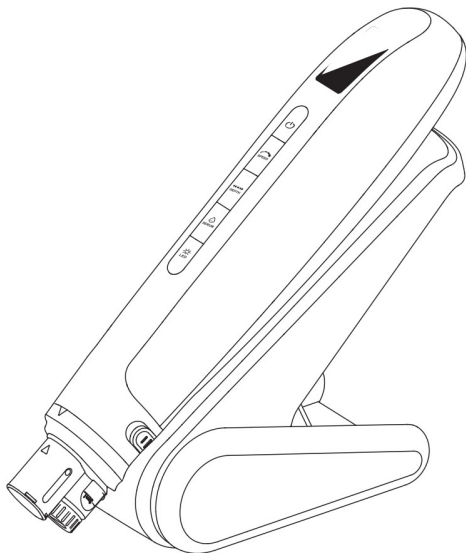

Brugervejledning

Læs vejledningen grundigt før brug

MESOSKINLINE®


BRUGERVEJLEDNING

Indhold

Side	Afsnit
03	Komponenter
04	Nålemoduler
05	Display
06	Displaymeddelelser
07	Knapfunktioner
08	Fyld nålemodulet
09	Monter nålemodulet
10	Afmonter nålemodulet
11	Holder til håndstykket
12	Opladning
13	Specifikationer
14	Advarsler
15	Vedligeholdelse og service

Læs hele vejledningen, før du bruger enheden. Gem den til senere brug.


Komponenter

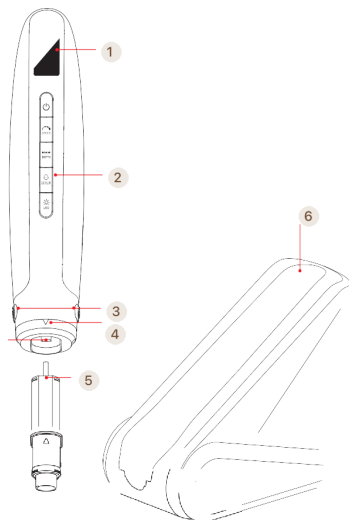

- 1 Display 2 Betjeningsknapper
3 Udløserknapper 4 Monteringsmærke
5 Nålemodul 6 Holder til håndstykket

Strømtilslutningen sidder øverst på håndstykket. Gennem serumvinduet kan du kontrollere reservoiret.

Nålemoduler

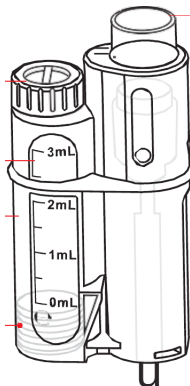

Nålemodulet består af en beskyttelseshætte, et reservoirlåg, et reservoir med måleskala, en ventil og et monteringsmærke.

Reservoirnøgle: Brug den U-formede ende til reservoirlåget og den I-formede ende til at føre stemplet tilbage.

Typer af nålemoduler

18 nåle · 36 nåle · 42 nåle · Nano

Kun til engangsbrug. Bortskaf brugte nålemoduler i en egnet beholder til farligt affald.

03 / BRUGERVEJLEDNING

Display

LED-lys

Standardindstilling: slukket. Displayet viser slukket lys, blå lys eller rødt lys.

Blå lys: mod inflammation og aknemærker.

Rødt lys: hudens stofskifte og oplysning af huden.

Nålelængde

Standardindstilling: 0,00 mm. Vælg fra 0,00 til 2,00 mm i trin på 0,25 mm med moduler med 18, 36 eller 42 nåle. Ved Nano-moduler vises kun » Nano«.

Hastighedstrin

Standardindstilling: trin 1. Vælg trin 1–6; højere trin øger hastigheden. Et blinkende hastighedstrin angiver pause.

Serumtilførsel

Standardindstilling: slukket. Vælg slukket, trin 1 (langsom), trin 2 (middel) eller trin 3 (hurtig).

Blinkende rør: serum strømmer ud.

Helt oplyst rør: serumtilførslen er stoppet.

Tomt rør: reservoiret er tomt for serum.

Batteriindikatoren viser den resterende opladning. Tilpas indstillingerne til de individuelle forhold.

04 / BRUGERVEJLEDNING

Displaymeddelelser

Nålemodul ikke registreret

Der er ikke monteret et nålemodul, eller modulet er ikke originalt.

Opstart

Enheden starter op. Vent, til opstarten er afsluttet.

Nulstilling

Monter ikke et nålemodul, mens enheden nulstilles.

Nedlukning

Monter ikke et nålemodul, mens enheden lukker ned.

05 / BRUGERVEJLEDNING

Knapfunktioner

Tænd og sluk

Hold knappen inde i 1,5 sekunder for at tænde eller slukke. Når enheden er tændt, trykkes for at sætte på pause eller genstarte.

Hastighed

Tryk for at skifte mellem hastighedstrin 1–6.

Dybde

Tryk for at justere nåledybden. Dybden kan ikke justeres med Nano-moduler.

Serum

Tryk for at justere serumtilførslen. Hver dråbe angiver ét tilførselstrin; slukket lys betyder, at tilførslen er slået fra. Standardmønstret er jævn tilførsel.


Øg serumtilførslen

Hold serumknappen inde for at øge serumtilførslen.

LED

Tryk for at vælge blå lys, rødt lys eller slukket lys.

Fyld nålemodulet

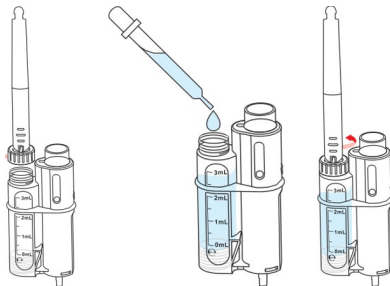

01 Åbn

Tag nålemodulet og reservoirnøglen frem. Brug den U-formede ende til at skrue reservoirlåget af mod uret.

02 Fyld

Fyld reservoiret med serum.

03 Luk

Brug den U-formede ende til at spænde låget med uret.

Genopfyldning under brug


Når reservoiret er tomt, bruges den I-formede ende til at skrue mod uret og trække stemplet tilbage før genopfyldning.

07 / BRUGERVEJLEDNING

Monter nålemodulet


01 Tilpas og indsæt

Ret nålemodulet ind efter monteringsmærkerne og enhedens indvendige rille. Indsæt det, indtil du hører et klik.

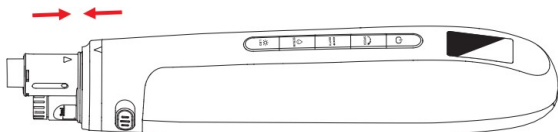


02 Kontroller monteringen

Kontroller, at nålemodulet sidder helt på plads og er korrekt rettet ind i forhold til håndstykket.

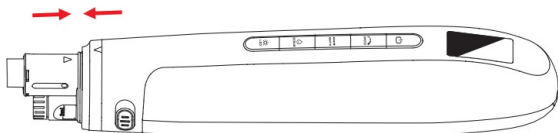

03 Fjern hættten

Fjern beskyttelseshættten, og start derefter enheden.

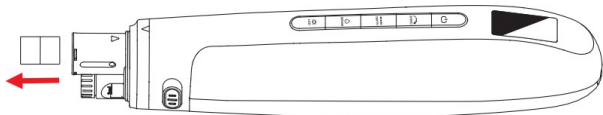

08 / BRUGERVEJLEDNING


Afmonter nålemodulet

01 Sluk


Kontroller, at enheden er slukket. Sæt beskyttelseshætten på nålemodulet igen.

02 Frigør begge sider


Tag med højre hånd fat i udløserknapperne på begge sider af enheden, og træk opad. Hold serum-modulet med venstre hånd, og træk det ud mod venstre.

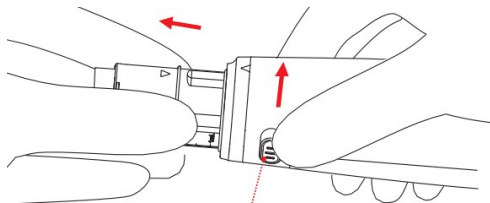


Træk i begge udløserknapper samtidig. Frigør ikke kun den ene side.

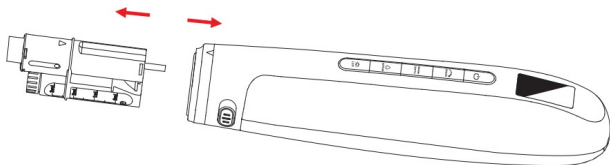

Holder til håndstykket

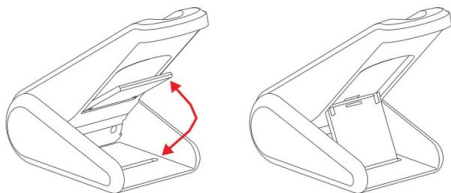

Kontroller, at støttepladen sidder sikkert i rillen, før du lægger håndstykket i holderen.

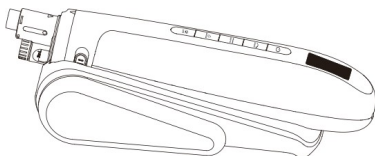


Sæt holderen op, så den støtter håndstykket.



Placer håndstykket sikkert i holderen.

10 / BRUGERVEJLEDNING

Opladning

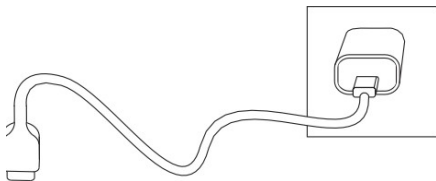

Tilslut ladekablet til enheden, og sæt adapteren i en stikkontakt. En fuld opladning tager cirka 3 timer.

Batteriindikatorer

Bevægelig indikator: opladning i gang.

Fuld indikator: opladningen er afsluttet.

Lavt batteri: 10 % tilbage; oplad snarest.

Før enheden slukker, blinker batteriikonet fem gange, og enheden bipper.

Brug ikke enheden, mens den oplades.

Specifikationer

Enhed	Oplysninger
Produkt	MESOpower® Micro-Infusion Pen
Oprindelig model	Hydra.pen H7
Adapterindgang	100–240 V · 50–60 Hz
Adapterudgang	5 V DC · 1 A
Pakkevægt	705 g
Pakkemål	145 × 193 × 73 mm

Pakkens indhold

Del	Antal
Håndstykke	1
Holder til håndstykket	1
Nålemoduler	2
Adapter	1
Ladekabel	1
Brugervejledning	1
Reservoirnøgle	2

Advarsler

Læs før brug

Følg vejledningen. Brug kun enheden til de funktioner, der er beskrevet her. Opbevar enhed og emballage utilgængeligt for børn. Produktet er kun til voksne.

Må ikke anvendes ved

Akutte sygdomme eller blodsygdomme, herunder hæmofili eller koagulationsforstyrrelser; melanose i ansigtet, følsom hud eller smitsomme hudsygdomme; forhøjet kropswarmte eller temperatur over 38 °C; tilstande, der kræver regelmæssige hospitalsbesøg, eller under medicinering; graviditet eller amning; børn under 12 år; psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsnedsættelser eller utilstrækkelig erfaring og viden.

Omgivelser og strøm

Brug ikke enheden nær varme, støv eller fugt. Brug den ikke under opladning, og del ikke stikkontakten med apparater med højt strømforbrug. Tag fat i stikket, når strømmen afbrydes; træk aldrig i ledningen. En beskadiget ledning skal repareres af producenten eller dennes serviceafdeling.

Håndtering og reparation

Reparer, adskil eller ændr ikke enheden uden tilladelse. Brug kun tilbehør fra producenten. Undgå klemning, slag og stød under transport, montering og brug, da dette kan beskadige produktet.

13 / BRUGERVEJLEDNING

Vedligeholdelse og service

Daglig vedligeholdelse

- 1 Sluk enheden, og afbryd strømmen før rengøring.
- 2 Rengør overfladen med desinfektionsservietter efter hver brug. Vær opmærksom på mellemrum, samlinger og forbindelsen mellem nålemodul og håndstykke.
- 3 Skyl ikke enheden direkte med vand.

Service og garanti

Produktet har ét års garanti fra datoen på gyldigt købsbevis eller dokumentation for forsendelse og modtagelse.

Garantien dækker ikke:

- Skader som følge af naturkatastrofer eller andre forhold uden for rimelig kontrol.
- Skader som følge af forkert brug, opbevaring eller vedligeholdelse.
- Skader som følge af uautoriseret adskillelse, samling eller ændring.
- Skader forårsaget af nålemoduler, som ikke er leveret af virksomheden.
- Krav fremsat efter garantiperiodens udløb.

Kontakt os, hvis der opstår problemer med produktet under brug.

Virksomheden forbeholder sig den endelige fortolkningsret.



Micro-Infusion Pen

Brugervejledning

